

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

REF 3096P00-VK



1. Tilsigtet anvendelse

Til *in vitro*-diagnostisk anvendelse. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x (3096P00-VK) er beregnet som en vaskebuffer til brug med testene RIDASCREEN® IFX Monitoring (G09041), RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies (G09042), RIDASCREEN® ADM Monitoring (G09043), RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies (G09044), RIDASCREEN® VDZ Monitoring (G09045), RIDASCREEN® GLM Monitoring (G09047) og RIDASCREEN® UST Monitoring (G09049).

Produktet er beregnet til professionel brug.

2. Oversigt og forklaring af testen

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x tilbydes som tilbehør til RIDASCREEN®-tests (se afsnit 1. Tilsigtet anvendelse).

3. Testprincip

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x er koncentreret 20-gange og skal anvendes som beskrevet i brugsanvisningen til RIDASCREEN®-testene (se afsnit 1. Tilsigtet anvendelse).

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x anvendes til at vaske RIDASCREEN®-mikrotiterpladen.

4. Medfølgende reagenser

Tabel 1: Reagenser til RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

Sættets komponenter	Mængde		Beskrivelse
TDM Wash buffer 20x <i>Transparent låg</i>	1 x	50 mL	Vaskebuffer, vaskemiddel i fosfatbufferopløsning og antimikrobielle midler (koncentreret 20-gange)

5. Opbevaringsanvisninger

Følg retningslinjerne for håndtering i tabel 2, og opbevar produktet direkte efter brug i henhold til de angivne oplysninger. Når udløbsdatoen er overskredet, eller den anbefalede opbevaringsperiode for det åbnede produkt er udløbet, er kvalitetsgarantien ikke længere gyldig.

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x leveres som et koncentrat (koncentreret 20-gange) og skal fortyndes 1:20 med destilleret eller deioniseret vand før brug (tilsæt 50 mL koncentrat til en 1000 mL gradueret cylinder og fyld op med destilleret vand til 1000 mL).

Tabel 2: Opbevaringsforhold og oplysninger

	Opbevaringstemperatur	Maksimal opbevaringstid	Supplerende bemærkninger om opbevaring
uåbnet	2 - 8 °C	Kan bruges indtil den trykte udløbsdato	-
fortyndet vaskebuffer	2 - 8 °C	≤ 4 uger	-

6. Nødvendige materialer, som ikke følger med

6.1 Reagenser

Reagenser
RIDASCREEN®-testen (se afsnit 1. Tilsigtet anvendelse)

6.2 Laboratorieudstyr

Det nødvendige laboratorieudstyr til RIDASCREEN®-testen er påkrævet til at lave testen (se afsnit 1. Tilsigtet anvendelse).

7. Advarsler og forsigtighedsregler for brugerne

Kun kvalificeret laboratoriepersonale må anvende dette produkt. Retningslinjerne for arbejde på medicinske laboratorier skal overholdes. Overhold nøje betjeningsvejledningen ved udførelse af RIDASCREEN®-testene. Brug ikke munden til at pipettere prøver eller reagenser. Undgå kontakt med ødelagt hud og slimhinder. Bær personligt beskyttelsesudstyr (passende handsker, kittel, sikkerhedsbriller) ved håndtering af reagenser og prøver, og vask hænderne efter endt brug af produktet. Der må ikke ryges, spises eller drikkes i områder, hvor prøver eller testreagenser behandles.

Farlige materialer er angivet i henhold til mærkningskrav.

Yderligere oplysninger om sikkerhedsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS) kan findes under varenummeret på <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Brugerne er ansvarlige for korrekt bortskaffelse af RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x efter brug. Overhold de nationale bestemmelser for bortskaffelse.

For brugere i Den Europæiske Union: Rapportér alle alvorlige bivirkninger i forbindelse med produktet til R-Biopharm AG og de relevante nationale myndigheder.

8. Testprocedure

Bring RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** til stuetemperatur (20 - 25 °C) før brug. RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** skal anvendes som beskrevet i brugsanvisningen til RIDASCREEN®-testene (se afsnit 1. Tilsigtet anvendelse).

9. Metodens begrænsninger










1. RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** er kun beregnet til brug med nævnte RIDASCREEN® TDM-tests (se afsnit 1. Tilsigtet anvendelse).
2. Dette produkt skal bruges i overensstemmelse med forordningen om god laboratoriepraksis (GLP). Ved brug af RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** skal operatører nøje følge producentens anvisninger for RIDASCREEN®-tests.

10. Versionshistorik

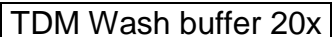
Versionsnummer	Afsnit og betegnelse
2021-12-09	Udgivelsesversion

11. Symbolforklaringer

Generelle symboler

	Til <i>in vitro</i> -diagnostisk anvendelse
	Betjeningsvejledningen skal overholdes
	Batchnummer
	Udløbsdato
	Opbevaringstemperatur
	Bestillingsnummer
	Antal tests
	Produktionsdato
	Producent

Testspecifikke symboler

	Vaskebuffer (koncentreret 20-gange)
---	-------------------------------------