

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

REF 3096P00-VK



1. Sihtotstarve

In vitro diagnostiliseks kasutamiseks. Toode RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x (3096P00-VK) on mõeldud pesupuhvrina kasutamiseks koos analüüsidega RIDASCREEN® IFX Monitoring (G09041), RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies (G09042), RIDASCREEN® ADM Monitoring (G09043), RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies (G09044), RIDASCREEN® VDZ Monitoring (G09045), RIDASCREEN® GLM Monitoring (G09047) ja RIDASCREEN® UST Monitoring (G09049).

Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

2. Analüüsi kokkuvõte ja selgitus

Pesupuhvrit RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x müüakse analüüside RIDASCREEN® lisatarvikuna (vaadake jaotist 1 („Sihtotstarve“)).

3. Analüüsi põhimõte

Pesupuhver RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x on 20-kordne kontsentraat ja seda tuleb kasutada analüüside RIDASCREEN® kasutusjuhendite kohaselt (vaadake jaotist 1 „Sihtotstarve“).

Pesupuhvrit RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x kasutatakse mikrotiiterplaadi RIDASCREEN® pesemiseks.

4. Komplekti kuuluvad reaktiivid

Tabel 1. Pesupuhvri RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x komplekti kuuluvad reaktiivid

Komplekti osad	Kogus		Kirjeldus
TDM Wash buffer 20x <i>Läbipaistev kaas</i>	1 x	50 mL	Pesupuhver, detergent fosfaatpuhvri lahuses ja mikroobidevastased ained (20-kordne kontsentraat)

5. Säilitamisjuhised

Järgige tabelis 2 antud käsitsemisjuhiseid ja säilitage toodet vahetult pärast kasutamist neis kirjeldatud viisil. Pärast aegumiskuupäeva või avatud toote soovitusliku säilitusaja möödumist kaotab kvaliteedigarantii kehtivuse.

Pesupuhvrit RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x tarnitakse 20-kordse kontsentratsioonina ja see tuleb enne kasutamist lahjendada destilleeritud või deioniseeritud veega suhteni 1:20 (valage 1000 mL mõõtesilindrisse 50 mL kontsentrati ja täitke destilleeritud veega kuni 1000 mL piirini).

Tabel 2. Säilitamistingimused ja teave

	Säilitamistemperatuur	Maksimaalne säilitamisaeg	Lisamärkused säilitamise kohta
avamata	2 - 8 °C	Võib kasutada kuni etiketile trükitud aegumiskuupäevani	-
lahjendatud pesupuhver	2 - 8 °C	≤ 4 nädalat	-

6. Vajalikud reaktiivid, mis ei kuulu komplekti

6.1 Reaktiivid

Reaktiivid
Analüüs RIDASCREEN® (vaadake jaotist 1 („Sihtotstarve“))

6.2 Laboriseadmed

Analüüsimiseks on vaja analüüsi RIDASCREEN® jaoks ette nähtud laboriseadmeid (vaadake jaotist 1 „Sihtotstarve“).

7. Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutajatele

Toodet tohivad kasutada ainult kvalifitseeritud laboritöötajad.

Järgida tuleb meditsiinilaborites töötamise suuniseid (head laboritava). Järgige analüüside RIDASCREEN® kasutamisel täpselt kasutusjuhendit. Ärge kasutage proovide ega reaktiivide pipeteerimisel oma suud. Vältige haavadele ja limaskestadele sattumist. Kandke reaktiivide ja proovide käsitsemisel isikukaitsevahendeid (sobivaid kindaid, laborikitlit, kaitseprille) ja peske pärast toote kasutamist käsi. Ärge suitsetage, sööge ega jooge kohtades, kus proove käsitsetakse.

Ohtlikud materjalid on tähistatud märgistamiskohustuste kohaselt.

Lisateavet ohutuskaardi (Safety Data Sheet, SDS) kohta leiate artiklikoodi alt aadressil

<https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Kasutajad vastutavad pesupuhvri RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x kasutamisejärgse nõuetekohase jäätmekäitluse eest. Järgige riiklikke jäätmekäitluse eeskirju.

Euroopa Liidu kasutajatele. Teatage kõigist tootega seotud rasketest kõrvaltoimetest ettevõttele R-Biopharm AG ja vastavatele riiklikele ametiasutustele.

8. Analüüsiprotseduur

Enne kasutamist laske pesupuhvril RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x soojeneda toatemperatuurile (20 - 25 °C). Pesupuhvrit RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x tuleb kasutada analüüside RIDASCREEN® kasutusjuhendite kohaselt (vaadake jaotist 1 „Sihtotstarve“).

9. Meetodi piirangud










1. Pesupuhver RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x on mõeldud vaid nimetatud analüüsidega RIDASCREEN® TDM kasutamiseks (vaadake jaotist 1 „Sihtotstarve“).
2. Seda toodet tuleb kasutada hea laboritava määruse (GLP) kohaselt. Kasutajad peavad pesupuhvri RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x kasutamisel täpselt järgima analüüsi RIDASCREEN® juhiseid.

10. Versiooniajalugu

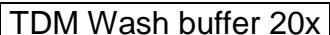
Versiooni number	Jaotis ja tähistus
2021-12-09	Väljaande versioon

11. Sümbolite selgitus

Üldised sümbolid

	<i>In vitro</i> diagnostiliseks kasutamiseks
	Järgige kasutusjuhendit
	Partiinumber
	Kasutada enne
	Säilitamistemperatuur
	Artikli number
	Analüüside arv
	Tootmiskuupäev
	Tootja

Analüüsipõhised sümbolid

 Pesupuhver (kontsentreeritud 20 korda)